

# BANDEAU TETE DE LIT HOSPITALISATION


- Poids moyen : 7 kg/ml
- Fixation murale par cheville appropriée au support
- Nettoyage et désinfection : chiffon doux et désinfectant
- Indice de protection IP20
- Finition peinture époxy Blanc
- Matériaux: aluminium

N°	Bandeau tête de lit	Bandeau Hospitalisation	Bandeau Réanimation
1	Longueur	1 500 mm	1 500 mm
2	Lumière Ambiante	1 x 36 W HF / Manette	1 x 36 W HF / Manette
3	Lumière Lecture	1 x 18 W HF/ Manette	1 x 18 W HF/ Manette
4	Prise de Courant	2/1 Circuit	4/2 Circuits
5	Appel Infirmière	Sur Manette	Sur Manette
6	Fluides Médicaux (Réservation)	Oxygène & Vide	Oxygène, Vide & Air Comprimé
7	Embout bombé	Coiffe en plastique	Coiffe en plastique
8	Découpe Arrière	Centrale	Centrale
9	Couleurs	Blanc, Peinture Epoxy	Blanc, Peinture Epoxy




Les Bandeaux Tête de Lit peuvent être configurés selon le nombre de lits et les dimensions de la salle. Des accessoires supplémentaires peuvent être ajoutés au bandeau à la demande du client tel que des prises électriques, prises de gaz, prise téléphone et internet Etc.

# BANDEAU TETE DE LIT REANIMATION

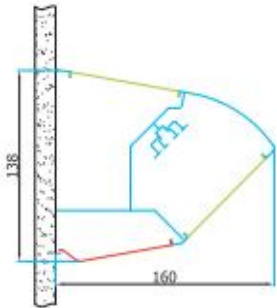


## COUPE

Fluidité des lignes sur l'ensemble du profilé aluminium. Peinture spécifique (qualité époxy) au milieu hospitalier. Équipements électriques, fluides médicaux et éclairage entièrement modulables. Maintenance par platines débrochables. Accès total aux prises grâce à la coiffe fluide. Bonne asepsie sans creux (pas d'accumulation de poussières ou de bactéries), nettoyage rapide et sécurisé. Profilé aluminium de forte section pour une rigidité parfaite. Résistance des composants à une utilisation intensive.

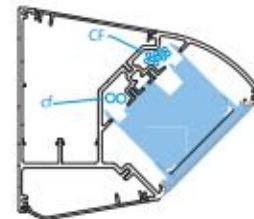


## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Séparation physique entre courants forts et courants faibles. Chaque accessoire est cloisonné par des boîtes individuelles. Les prises sont de type Mosaic une plaque de propreté. Possibilité d'ajouter des accessoires sans usinage du couvercle ni transformation interne du bandeau (conception et technologie).

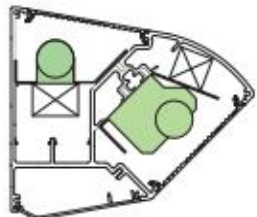

## ÉCLAIRAGES

L'Écoline intègre un éclairage général de 36w HF et un éclairage de lecture ou de soin de 18w HF. (Possibilité d'intégrer un éclairage de

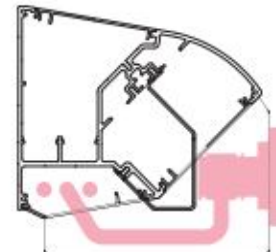

## ÉQUIPEMENTS FLUIDES MÉDICAUX

Compartiments et couvercles indépendants isolés des équipements électriques. Montage modulaire des prises fluides de toutes marques. Système de coiffe fluide apportant une parfaite accessibilité (maintenance aisée). Compartiment fluides accueillant 3 tubes.