

## **FICHE TECHNIQUE GAINÉ TÊTE DE LIT HOSPITALISATION PLATE DOUBLE** **de Marque Oxymed**

**Marque et Origine.**

**Caractéristique Techniques.**

**Option et accessoire**




Issu d'une conception concertée avec les utilisateurs, installateurs, personnel de maintenance et organismes de contrôle, le bandeau tête de lit satisfait à toutes les exigences du milieu hospitalier : concept et fonctionnalité pour le patient et le personnel soignant, mais aussi respect des normes de sécurité et d'hygiène.


Son esthétique lui confère un standing d'hôtellerie, et sa totale modularité permet de l'évolution des accessoires électriques et fluides.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Vue de face

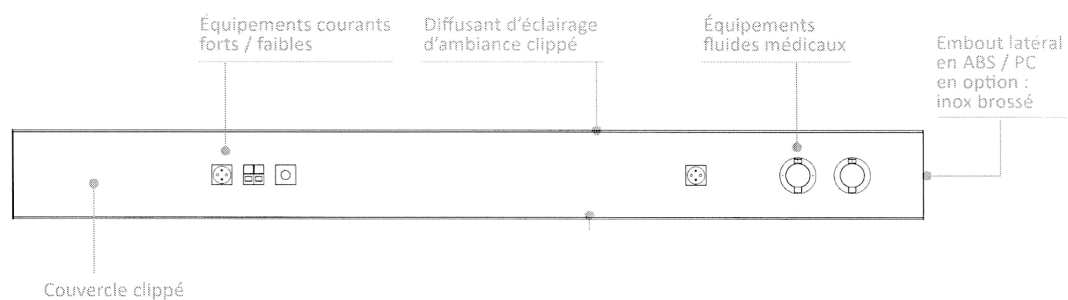

### Vue en coupe

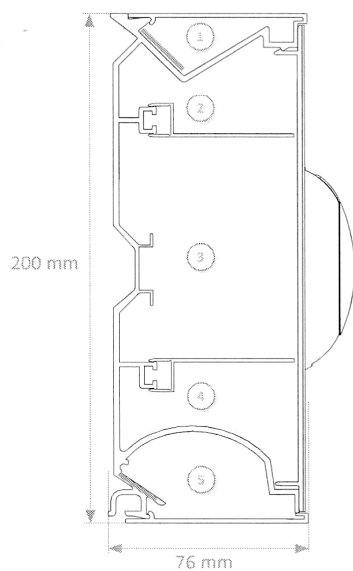

- ① Compartiment éclairages ambiance et veille
- ② Compartiment courants faibles
- ③ Compartiment courants forts
- ④ Compartiment fluides médicaux
- ⑤ Compartiment éclairage lecture

### **Design confort**

- . Fluidité de sa ligne réalisée par un bandeau uniforme.
- . Accès ergonomique aux équipements électriques montés sur une face plate (juste compromis pour une bonne tenue des prises et un accès facile
- . Confort d'éclairages complètement intégrés afin de limiter au maximum les éblouissements tout en assurant des éclairagements efficaces
- . Finition laquée blanche RAL 9016 (peinture poudre qualité époxy).

### **Modularité entretien**

- . Équipements électriques, fluides médicaux et éclairages entièrement modulables permettant des extensions des équipements sans usinage particulier.
- . Facilité de maintenance des éclairages par l'interchangeabilité des platines sur borniers embronchable.
- . Accès total aux prises fluides et tuyaux d'alimentation sans être contraint d'isoler électriquement le bandeau.

### **Hygiène sécurité**

- . Limiter au maximum les creux susceptibles d'accumulation de poussières ou microbes pour une meilleure aseptie.
- . La partie supérieure du bandeau offre une parfaite planéité pour un dépoussiérage rapide et sans danger d'écorchure.
- . Séparation entre les fluides médicaux et les compartiments électriques (norme EN 793).
- . Conformité aux normes en vigueur contrôlée et attestée sur chaque produit.

Un profilé aluminium de forte section assure au bandeau une parfaite rigidité sur tous supports et résiste à un usage intensif.

Inspiré des principes d'aménagement de bureaux ; sa conception modulaire permet d'ajouter ou modifier à postériorité les équipements électriques et fluides médicaux sans l'intervention du constructeur.

L'installation s'effectue rapidement sans démontage des façades du bandeau.

### **Équipements fluides médicaux**

- . Compartiment et couvercle indépendant isolés des équipements électriques.
- . Montage modulaire des prises fluides de toutes marques, fixation sur étriers inox et finition par un couvercle associé.
- . Ventilation fluide efficace complètement invisible.

### **Équipements éclairages**

- . Éclairage indirect (ambiant) sur toute la longueur du bandeau par 1 ou 2 tubes fluo.
- . Diffusant polycarbonate incassable à double prisme, tenue au fil incandescent à 850°
- . Platine réflecteur équipé modulaire et amovible. Utilisation de tubes fluorescents standards.

### **Equipements électriques**

- . Séparation physique courants forts et faibles et couvercle indépendant. Isolation individuelle de chaque accessoire par boîtier plastique
- . Accessoire électrique avec plaque de propreté décorative.
- . Concept modulaire par fixation en fond de bandeau des accessoires.
- . Ajout d'accessoires sans usinage du couvercle ni transformation interne du bandeau.